

ŁÓŻECZKA NOWORODKOWE

BM - 01



Wymiary zew. łóżeczka:

- długość 710 mm
- szerokość 465 mm
- wysokość 950 mm

Wymiary wew. kojca:

- długość 660 mm
- szerokość 420 mm
- głębokość 230 mm



Pozycja Trendelenburga

Łóżeczko noworodkowe **typu BM - 01** jest przeznaczone do wyposażenia oddziałów położniczo-noworodkowych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji łatwo i wygodnie można nim najechać nad łóżko matki. Konstrukcja łóżeczka jest wykonana z rurek ze stali lakierowanej proszkowo, a kojec z przezroczystego tworzywa. Kojec jest łatwo wymiwalny i wyścielany materacykiem. Specjalny uchwyt umożliwia ustawienie kojca w pozycji Trendelenburga + 15°. Podstawa jest wyposażona w cztery kółka, w tym dwa posiadają blokadę.

ŁÓŻECZKO NOWORODKOWE BM - 01

BM - 02




Wymiary zew. łóżeczka:

- długość 850*/710 mm
- szerokość 530*/465 mm
- wysokość 950 mm

Wymiary wew. kojca:

- długość 660 mm
- szerokość 420 mm
- głębokość 230 mm

*- wymiar pomiędzy uchwytami

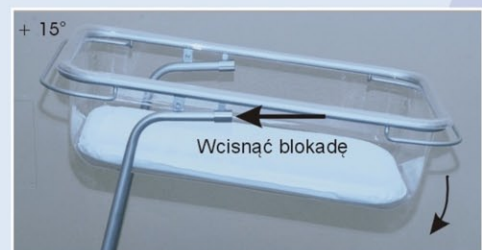

Pozycja Trendelenburga

Aby ustawić kojec w pozycji Trendelenburga należy:

1. Wcisnąć blokadę z obu stron łóżeczka
2. Opuścić przód łóżeczka w dół.
3. W celu powrotu kojca do pozycji wyjściowej podnieść przód łóżeczka w górę

Łóżeczko noworodkowe **typu BM-02** jest przeznaczone do wyposażenia oddziałów położniczo-noworodkowych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji łatwo i wygodnie można nim najechać nad łóżko matki. Konstrukcja łóżeczka jest wykonana z rurek ze stali kwasoodpornej, a kojec z przezroczystego tworzywa. Kojec jest łatwo wymiwalny i wyścielany materacykiem. Specjalny system blokady umożliwia ustawienie kojca w pozycji Trendelenburga + 15°. Podstawa jest wyposażona w cztery kółka, w tym dwa posiadają blokadę.

ŁÓŻECZKO NOWORODKOWE BM - 02