



STANOWISKA DO PIELĘGNACJI NOWORODKÓW SYSTEM MILLENIUM

Stanowisko do pielęgnacji noworodków i niemowląt „KACPEREK” systemu Millenium jest przeznaczone do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych przy noworodkach i niemowlętach na oddziałach położniczo-noworodkowych, w pokojach typu „rooming in” (matka z dzieckiem), a także w punktach pielęgnacyjnych sal noworodkowych i niemowlęcych na oddziałach dziecięcych.


Stanowisko „KACPEREK” zapewnia skupienie w jednym miejscu czynności pielęgnacyjnych, takich jak: kąpiel, przewijanie, kosmetyka czy ważenie. Pozwala ono również na prowadzenie badań oraz rutynowych zabiegów medycznych.

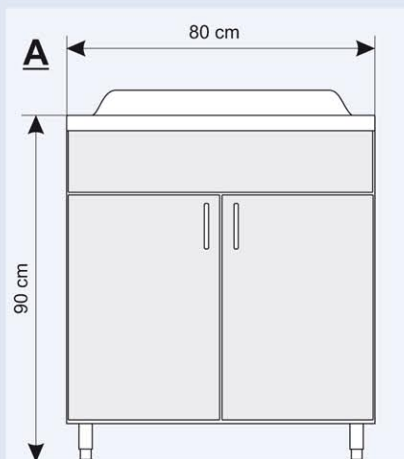


Moduł A

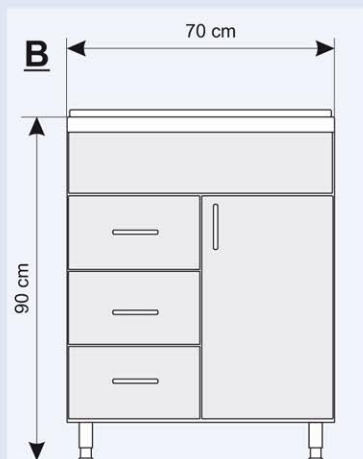

Moduł B

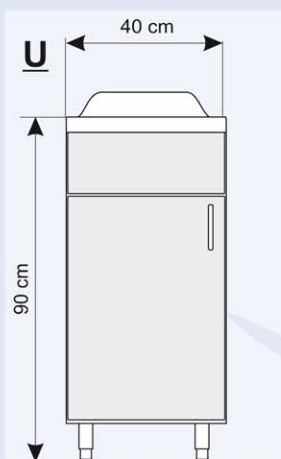

Moduł U

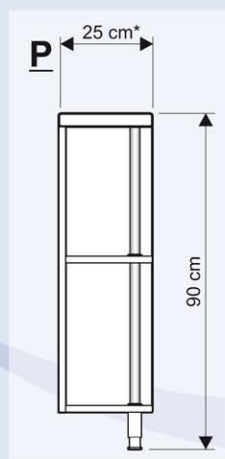

Moduł P

Głębokość modułów - 58 cm.

Dostępny jest moduł A1 - szafka z wanienką o szerokości 90 cm.

Dopuszcza się zmianę wymiaru (*) w module P na życzenie klienta.

„KACPEREK”

Wyposażenie standardowe:

Stanowisko składa się z czterech podstawowych modułów:

- A - szafka z wanienką
- B - stolik /szafka/ zabiegowy z materacykiem
- U - szafka z umywalką
- P - zestaw półek /lewy lub prawy/

Szafki modułów A, B, U oraz półki modułu P są wykonane z płyty MDF. Fronty szafek (drzwiczki, czola szuflad) oraz półki modułu P są lakierowane na wybrany kolor wg wzornika kolorów. Szafki wyposażone są w nóżki z możliwością regulacji. Blaty z wanienką i umywalką są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Materacyk pokryty jest materiałem zmywalnym z PCV odpornym na środki dezynfekcyjne.

Wyposażenie opcjonalne:

Opcjonalnie stanowisko można wyposażać w:

- baterię umywalkową z prysznicem lub bez,
- ogrzewacz noworodkowy,
- uchyloną lub wysuwaną półkę na wagę,
- wysuwany kosz na odpady,
- blendy, elementy do łączenia szafek w jedną całość (zapewniając szczelność na połączeniu).

STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKÓW „KACPEREK”