


STOLIKI INSTRUMENTALNE TYP MAYO SERIA K-4

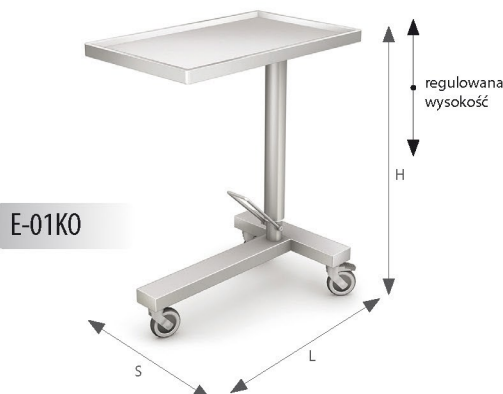

Stolik E-01 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, **blat** z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°, z blokadą obrotu, wysokość regulowana **hydraulicznie** w zakresie 960-1330 mm za pomocą pedału nożnego **podstawa** wyposażona w pojedyncze koła o średnicy 75 mm z blokadą

Opcja dodatkowo płatna: wymienny - zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni, podwójne koła o średnicy 100 mm z blokadą

Wymiary całkowite:
750 x 500 x 960-1330 mm
[L x S x H]
Wymiar blatu: 750 x 500 mm
[L x S]



E-01KO i E-01KO-E ze zdejmowalnym blatem

STOLIKI INSTRUMENTALNE SERIA K-4 ELEKTRYCZNE

Jedyny na rynku stolik instrumentalny o napędzie elektrycznym, umożliwiający podnoszenie i opuszczanie blatu za pomocą silownika elektrycznego sterowanego przyciskami nożnymi umieszczonymi w podstawie stolika. Posiada wbudowany zestaw akumulatorów o napięciu bezpiecznym 24 V, automatyczny bezpiecznik przeciążeniowy oraz układ optyczno-dźwiękowy sygnalizujący niski poziom naładowania akumulatorów. Wyposażony w zewnętrzną ładowarkę akumulatorów, która pozwala na bezobsługową pracę sygnalizując zakończony proces ładowania.

Stolik E-01KO/E wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gta. 0H18N9, wyposażony w pojedyncze koła o średnicy 75 mm z blokadą.


Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360°, z blokadą obrotu..

Regulacja wysokości za pomocą podnośnika elektrycznego w zakresie 930-1370 mm.

Opcje dodatkowo płatne: wymienny - zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni, podwójne koła o średnicy 100 mm z blokadą

Wymiary całkowite: 750 x 500 x 930-1370 mm
[L x S x H]

Wymiar blatu: 750 x 500 mm
[L x S]

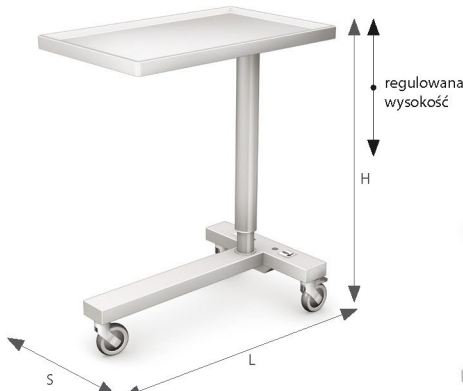

E-01KO-E



Opcja: stolik wyposażony w podwójne koła o średnicy 100 mm